

Anleitung zur Erstellung einer Sysinfo-Datei

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche 

2. Gehen Sie auf Einstellungen.

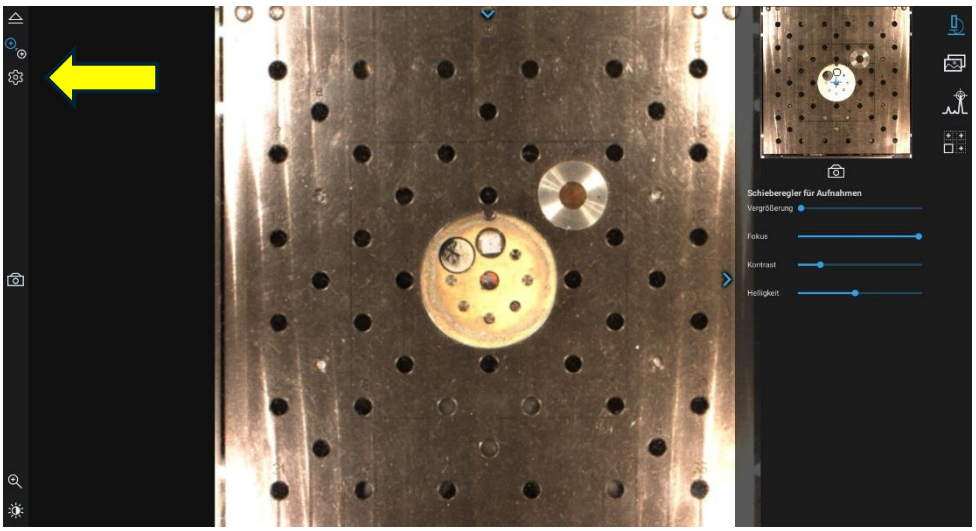

3. Klicken Sie zunächst auf die Software-Schaltfläche (Pfeil Nummer 1), dann auf die Schaltfläche Sysinfo-Datei.

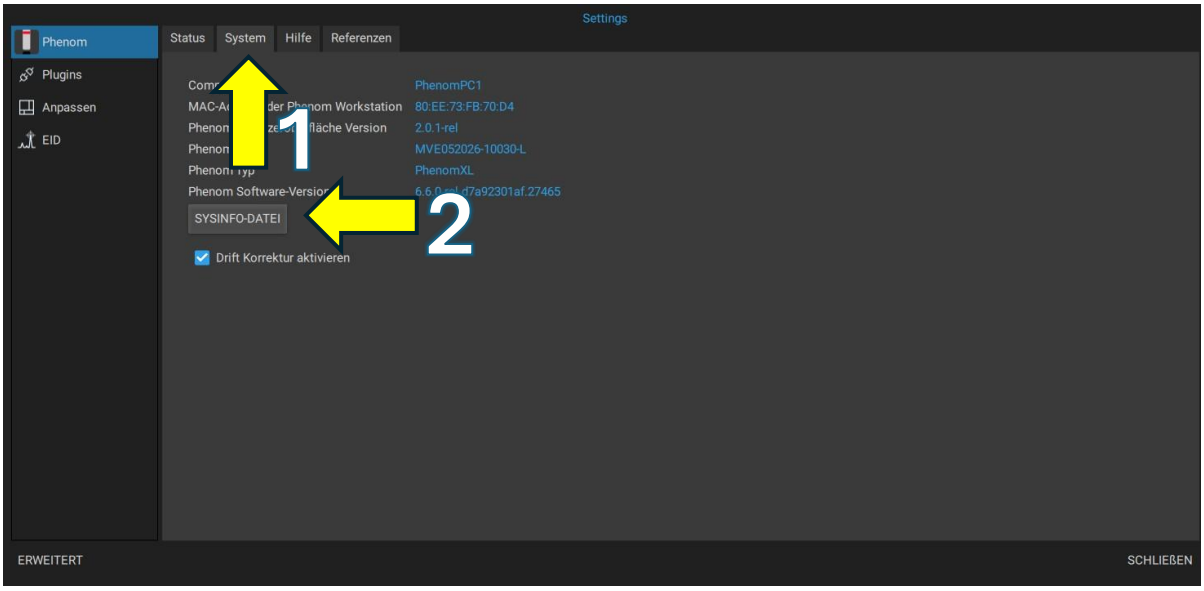

4. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche klicken, werden Sie in einem weiteren Fenster gefragt, in welchem Ordner Sie die Sysinfo-Datei speichern möchten. Wählen Sie den gewünschten Ordner und die Datei wird automatisch dort gespeichert.

